



**SartoConnect.**  
Die Datenbrücke zwischen  
Waage und PC.

# Warum übertragen Sie Ihre Daten nicht direkt in Ihr Anwendungsprogramm?

So professionell und einfach schaffen Sie sich eine Datenbrücke von Ihrer Sartorius Waage zu Ihrem PC. Sie bestimmen das „was, wann und wo“ – SartoConnect erledigt den Rest.

## Das Programm SartoConnect.


SartoConnect ist die Windows 95/98/NT-Anwendung für das Übertragen von Messdaten. Daten, die über die serielle Schnittstelle kommen, können mit Zusatzinformationen in die gewünschte PC-Anwendung übertragen (z.B: MS Word, MS Excel, Lotus 1-2-3 und andere) werden.

Alternativ ist auch die Speicherung in einer ASCII-Datei möglich. Die Übertragung kann entweder über Buttons und Tastenkombinationen oder zeitgesteuert erfolgen. Die übermittelten Daten lassen sich nach Belieben formatieren, filtern und mit Zusatzinformationen versehen.

Neben der Steuerung der Waage lassen sich auch selbstdefinierte Datenanforderungen festlegen. Die Rückantworten der Waagen können auch an die Anwendung übermittelt werden. Einmal vorgenommene Einstellungen können in einer Konfigurationsdatei gespeichert werden.



Beispiel: MS Excel 5.0 Diagramm

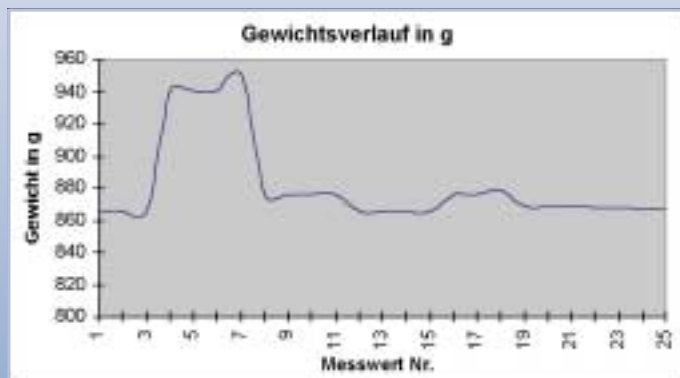

## Die Voraussetzungen.

SartoConnect ist geeignet für alle IBM-kompatiblen Rechner, die mit einer seriellen Schnittstelle ausgerüstet sind. Anschließbar sind alle Sartorius Labor- und Industriewaagen.

## Der Lieferumfang.

- Programmdisketten 3,5" in deutsch/englisch.
- RS232-Kabel wahlweise mit D-Sub 25-Stecker (YSC01L) oder 12 pol-Rundstecker (YSC01I).

## Die High-Lights.

- einfache Bedienung
- freie Formatierung der Messwerte
- Fernsteuerung der Waage
- Plausibilitätsgrenzüberprüfung
- zeitgesteuerte Messwertübernahme
- Übertragung freier Texte
- zusätzliche ID's (z.B. Produkt-ID)
- 8 einstellbare Steuerbefehle
- Datenübernahme per Hotkey
- Speicherung im ASCII-Format

**sartorius**